

# Appareil de pressothérapie Press 4


*Manuel d'utilisation :*



# CONTENU

Avertissement.....	3-6
Contenu.....	7-8
Instructions.....	9-10
Certificat de garantie.....	11

## Descriptif :

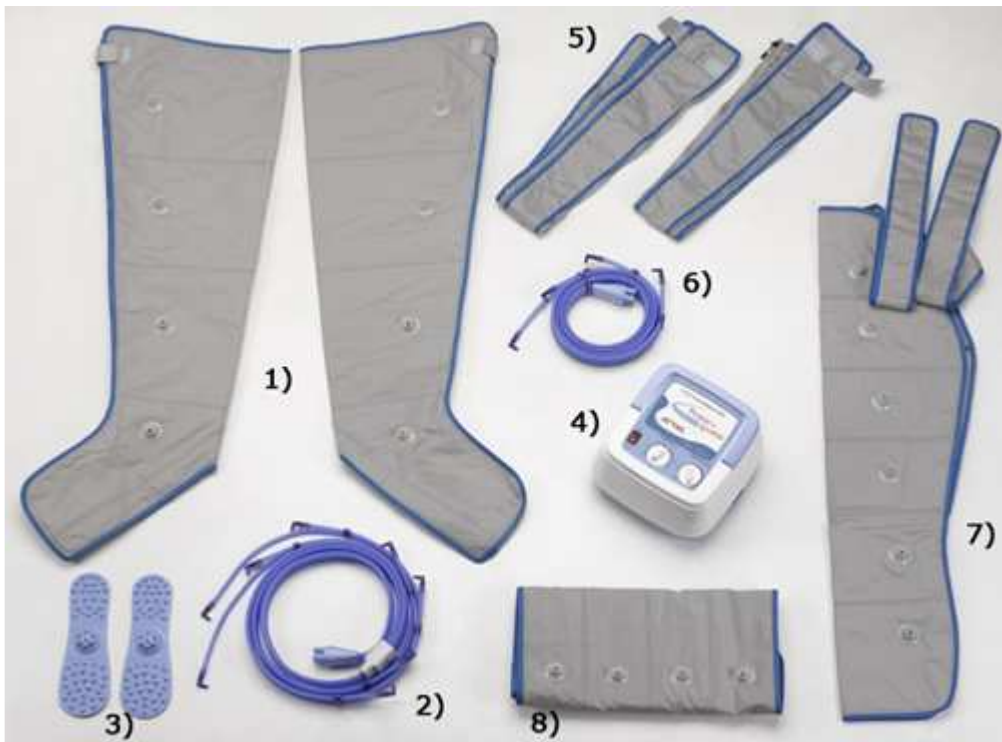

- 1) 2 Bottes    2) Tubulures bottes    3) Semelles de massage    4) Unité centrale  
5) Extensions bottes    6) Tubulure ceinture et manchon    7) Manchon    8) Ceinture

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension évaluée : AC 220-240V, 50/60Hz  
Intensité évaluée : 0.2A  
Consommation : 25W  
Réglage minuterie : 0-30 minutes  
Pression Minimale et Maximale : 20-200 mmHg  
Poids Unité Centrale : 3.5 kg

## Consignes de Sécurité

- Avant d'utiliser notre équipement, lisez attentivement cette notice.
- Gardez cette notice à proximité de l'appareil pour pouvoir la lire plus facilement.
- Cette notice présente les détails que doit savoir l'utilisateur pour se prévenir des dangers et des dysfonctionnements ainsi que pour une utilisation correcte de l'appareil.
- **Avant toute utilisation, consultez votre médecin pour la durée et la périodicité de vos séances.**



Interdictions



A respecter rigoureusement



Ne pas ouvrir




Ne pas débrancher l'appareil

## ATTENTION

### Ne pas utiliser dans les cas suivants :

- *Si vous souffrez d'inflammations ou de plaies externes, l'utilisation de l'appareil pourrait aggraver ces pathologies.*

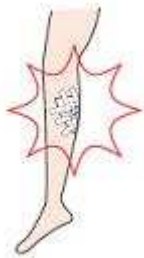


### Consultez un spécialiste en cas de :

- *fractures, troubles intestinaux, thromboses veineuses et d'autres pathologies qui nécessitent une immobilisation.*



## ATTENTION

**En cas de douleur, stopper le traitement**

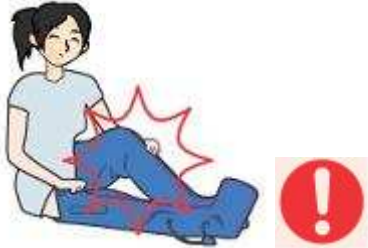

**Pour la 1<sup>ère</sup> utilisation, ne pas excéder 20 minutes d'utilisation.**

*Commencer par un cycle de 5 minutes et augmenter progressivement. L'utilisation continue pendant une longue durée est fortement déconseillée.*

*Using for about 10~20 minutes is suitable.*



**Utilisation interdite aux enfants.**



**Ne pas exposer à l'eau et de manière générale à l'humidité.**



**Si l'appareil présente un dysfonctionnement, ne pas ouvrir, ou essayer de réparer l'appareil.**



**Lors des branchement/débranchement avoir les mains toujours sèches.**



# ATTENTION


Utiliser l'appareil uniquement sur du 220V. Après chaque utilisation, veiller à débrancher soigneusement l'appareil.



Ne pas placer d'objet lourd sur le câble d'alimentation



Ne pas utiliser l'appareil sur une multiprise.

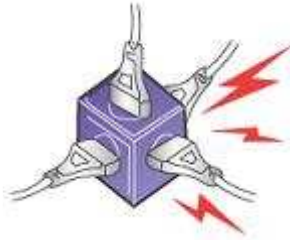

Ne pas donner de choc au produit, ni le laisser tomber.



Ne pas marcher avec les bottes, la ceinture et tous les accessoires en cours de traitement




Ne pas exposer le produit à une source de chaleur.




# ATTENTION

**Ne pas placer d'objet sur l'appareil.**

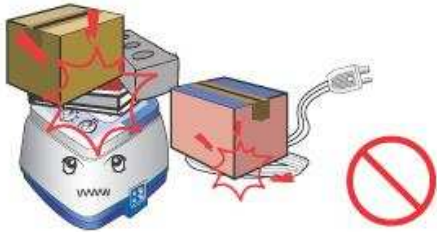

**Après une période de non utilisation prolongée, n'utilisez l'appareil qu'après avoir fait travailler à basse, moyenne et haute compression en répétant 3 à 4 fois chaque cycle.**

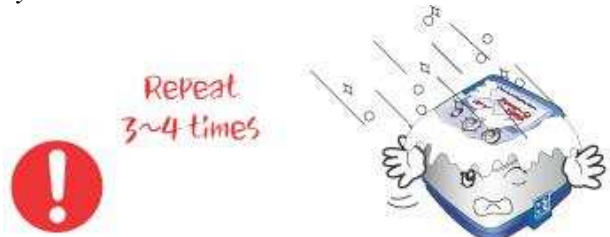

**Lorsque vous nettoyez l'appareil, ne pas utiliser de produits chimiques ou de détergents.**




**Ne pas se débarrasser du produit sur la voie publique.**




**L'usage de cet appareil est strictement réservé à l'usage de la pressothérapie**



**Ne pas plier ou tordre les tubulures.**

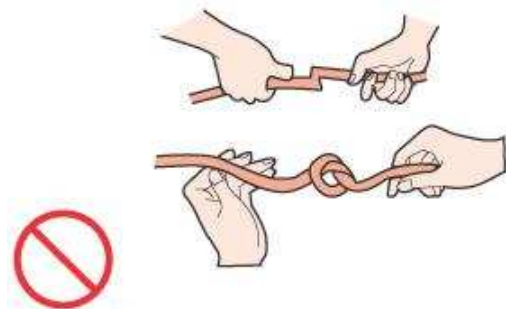

# Descriptif

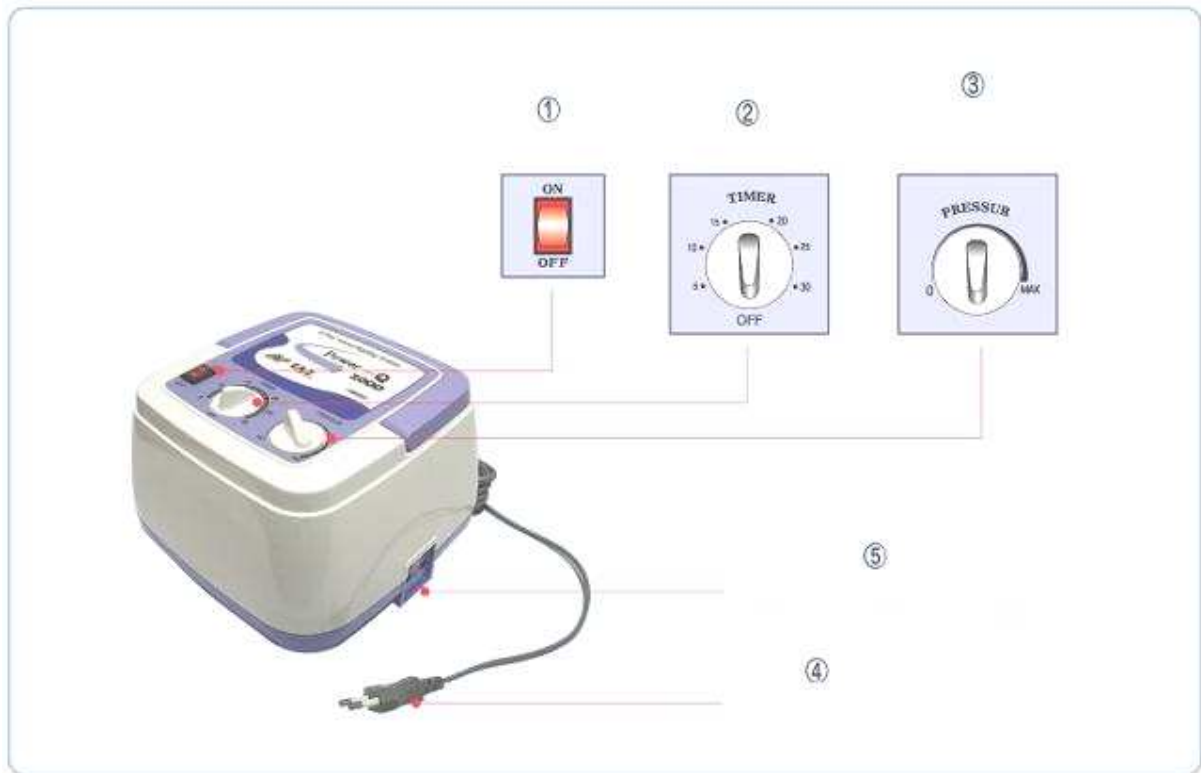

1) Interrupteur

4) Câble alimentation

2) Timer

5) Sortie d'air

3) Régulateur de pression

## Mise en route de l'appareil

- 1) Branchez l'appareil et appuyez sur le bouton rouge ON/OFF.
- 2) Munissez vous des bottes, du manchon ou de la ceinture, raccordez les tubulures aux raccords A, B, C et D comme sur l'image ci-dessous :



- 3) Après avoir connecté les bottes, connectez les tubulures à l'unité centrale.
- 4) Suivez la même procédure pour le manchon et la ceinture.

**Enfilez un des accessoires, ajustez le timer (0 à 30 minutes). Si vous n'ajustez pas le timer, l'appareil ne se mettra pas en route.**

**Enfin, réglez la puissance de la compression en fonction de vos besoins.**