
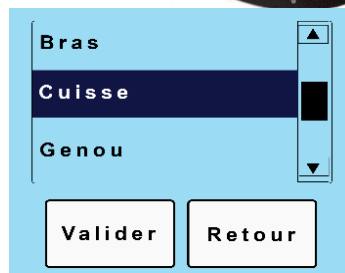






1. Cliquez sur le bouton « **Start** »  pour démarrer l'appareil




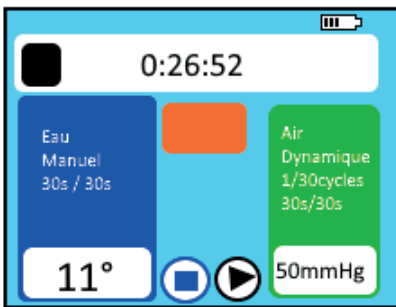
2. Sélectionnez le mode « **Manuel** »




3. Sélectionnez la cuisse avec les flèches  ou , puis « **Valider** »




4. cliquez sur  La séance débute




7. La séance est lancée, le temps doit commencer à décompter...

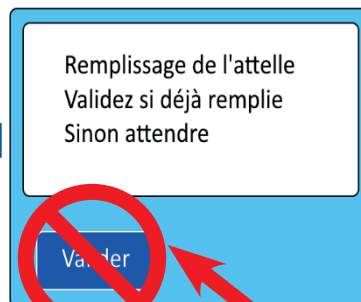

6. Patientez le temps que l'attelle se remplisse, la séance se lance automatiquement

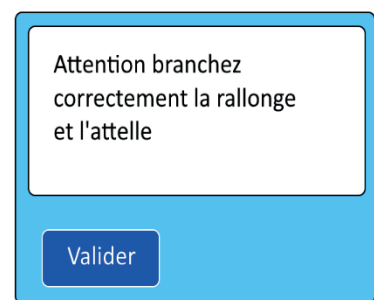

5. Branchez l'attelle sur le membre à soigner puis « **Valider** »

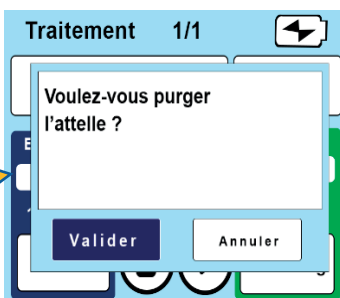

8. La séance est terminée. Un bip sonore apparait, cliquez sur « **Valider** » pour purger l'attelle.

 **Ne pas cliquer !**
Merci de patienter...