

À PROPOS DE CE MANUEL


Ce manuel décrit le dispositif de cryocompression active Squid avec poche de froid (« Squid ») de Portable Therapeutix en fournissant des instructions concernant son utilisation. Lire soigneusement l'ensemble du manuel avant l'emploi. Ce manuel contient des informations, les contre-indications et les mises en garde à observer pour assurer le fonctionnement sécurisé du Squid et le maintenir en bon état. Le Squid DOIT être utilisé conformément aux instructions.

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES LIVRÉS


COMPOSANTS DE LA POMPE



Régulateur de la pompe Squid

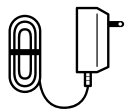


Adaptateur secteur (alimentation électrique)

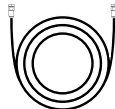

Tubulure de raccordement


COMPOSANTS DE L'ATELLE

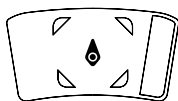

Bandage Squid



Étoffe de protection*

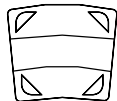

Reusable Cold Gel Pack

* L'étoffe de protection n'est pas incluse aux chevillières et aux épaulières

FIGURE 1 - COMPOSANTS ET ACCESSOIRES LIVRÉS

Matériaux créant un contact potentiel avec le patient :

- Bandage, nylon à garniture TPU
- Poche de gel, 18 à 28 % d'acétate de vinyle (EVA)
- Étoffe de protection, polyester

DESCRIPTION TECHNIQUE

Le Squid associe la cryothérapie avec une compression intermittente. La pompe du Squid envoie une pression d'air intermittente à une vessie de compression présente dans le bandage. Les bandages sont proposés en plusieurs tailles pour mieux les adapter à la région traitée. La pression de la pompe, la durée des cycles de gonflage et de dégonflage sont automatisées pour réguler le volume de compression et la durée du traitement. Quatre modes sont proposés pour le confort du patient (Table 1), avec différentes pressions maximales et cycles actifs et inactifs. La durée totale du traitement est de 15 minutes.

	PAR DÉFAUT			
MODE	1	2	3	4
PRESSIION MAX (MARCHE)	30 mmHG	50 mmHG	70 mmHG	85 mmHG
BASSE PRESSIION	0 mmHG	0 mmHG	0 mmHG	0 mmHG
TEMPS D'ACTIVITÉ	40 secondes	35 secondes	30 secondes	25 secondes
TEMPS D'INACTIVITÉ	20 secondes	25 secondes	30 secondes	35 secondes
DURÉE	15 minutes	15 minutes	15 minutes	15 minutes

TABLEAU 1 - DESCRIPTION DES MODES