

FIGURE 3 - INDICATEURS DE CHARGE ET DE BATTERIE FAIBLE

## MODE D'EMPLOI


REMARQUE : Le Squid est réutilisable.

### LA POCHE DE GEL FROID


1. Mettre la poche de gel froid Squid au congélateur entre  $-17^{\circ}\text{C}$  et  $-13^{\circ}\text{C}$  ( $0$  à  $8^{\circ}\text{F}$ ) pour une utilisation de 12 heures.
2. En conditions d'utilisation normale, une durée de vie d'un an est recommandée pour l'efficacité optimale de la poche de gel froid Squid.
3. Pour obtenir une nouvelle poche de gel, contacter le Service clientèle de Portable Therapeutix.

### PORT DU BANDAGE :

1. Retirer la poche de gel froid du congélateur et placer celle-ci dans le bandage de compression, en alignant la fermeture Velcro du bandage avec celle de la poche de gel, et serrer solidement les attaches Velcro.

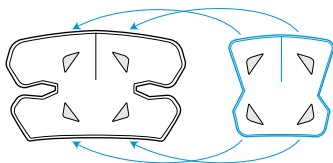

2. Les images en pages 9 et 10 montrent les bandages disponibles. Les images démontrant l'utilisation du Squid sur diverses zones traitées figurent pages 11-24. **Le Squid doit être utilisé sur un vêtement ou sur l'étoffe de protection.** Placer le bandage sur le vêtement ou l'étoffe de protection avec la poche de gel froid orientée vers la peau et le connecteur de tubulure vers le sol.
3. Fixer le bandage en place en utilisant la bande Velcro.
4. Relier les deux extrémités de la tubulure aux connecteurs sur le bandage et sur le régulateur de la pompe en appuyant sur la pince métallique côté tubulure du connecteur.

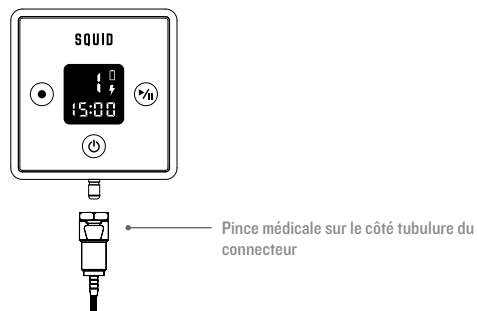

### INITIATION DU TRAITEMENT :

1. Démarrer le régulateur (marche) en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant une demi-seconde.
2. Sélectionner un mode de fonctionnement en appuyant sur le sélecteur de « MODE ». Le mode sélectionné apparaît sur l'afficheur indiqué par un numéro de 1 à 4 (1 pour basse pression et 4 pour pression élevée). Toujours démarrer en mode 1. Utiliser les modes 2, 3, 4 pour augmenter la pression jusqu'à l'obtention d'une pression confortable. Le mode peut être commuté pendant l'utilisation en appuyant sur le bouton de démarrage pendant une demi-seconde. Quand l'écran se met à clignoter, appuyer sur le « MODE » pour sélectionner le niveau souhaité. Lorsque le niveau souhaité clignote sur l'écran, appuyer de nouveau sur le bouton de démarrage pour poursuivre le traitement.
3. Appuyer sur le bouton de démarrage pendant une demi-seconde pour lancer le traitement. Le dispositif comprimera la poche de gel froid par intermittence sur la peau pendant 15 minutes.
4. À la fin des 15 minutes, lorsque la minuterie du régulateur de la pompe indiquera (0), retirer le bandage de son site anatomique. Le régulateur de la pompe Squid s'arrêtera automatiquement après moins de 5 secondes.