

JAMBIÈRE : GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


⚠ ATTENTION: CONSULT ACCOMPANYING DOCUMENTS BEFORE USE.

1

Mettre la poche de gel au congélateur pendant 12 heures avant l'emploi.




2

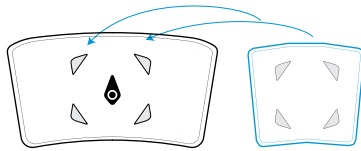

Fixer la poche de gel froid à l'intérieur du bandage à l'aide de la bande Velcro.


3

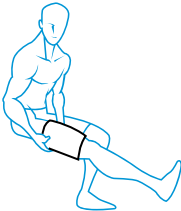

Placer l'étoffe de protection sur la jambe. Le Squid fonctionne également sur les vêtements.

4

Envelopper le Squid autour de la jambe.*

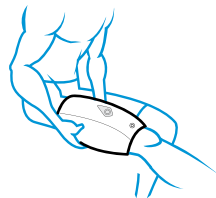

⚠ ATTENTION: CONSULT ACCOMPANYING DOCUMENTS BEFORE USE.


5

Fixer étroitement le bandage autour de la jambe à l'aide des panneaux Velcro.



6

Fixer la tubulure de raccordement à la pompe et au bandage.

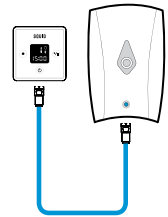

7



Commencer les 15 minutes de traitement.

*

CONSEIL SUR LE TRAITEMENT :

La jambière Squid peut être positionnée de diverses manières pour mieux traiter les zones affectées :

- QUADRICEPS
- ISCHIO-JAMBIERS
- GENOU
- MOLLET
- TIBIA