

# NICE

ENVELOPPEMENT DU GENOU  
INSTRUCTIONS



01 ENVELOPPEMENT DE GENOU



02 LIEU



03 SÉCURISÉ

Orientez la genouillère avec le côté bleu face au corps comme indiqué

Enroulez la genouillère centrée autour du genou, fixée par le Velcro



04 CONFORT

Une fois ajusté, l'écharpe doit être confortablement ajustée, sans plis



05 REMPLISSAGE 1

Dévissez le bouchon du réservoir sur le dessus de l'appareil et versez l'eau de la bouteille fournie, ou avec de l'eau de source minérale en bouteille.

NE PAS UTILISER L'EAU DU ROBINET !



06 REMPLISSAGE 2

Utilisez la bouteille d'eau déminéralisée, qui est livrée avec l'appareil



**!** CONSERVEZ LA BOUTEILLE D'EAU A NOUS RETOURNER !

# SYSTÈME DE THÉRAPIE NICE1 FROID + COMPRESSION

CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ AVANT D'UTILISER NICE1




Branchez le connecteur circulaire à l'arrière du NICE1.  
Vous entendrez un clic une fois correctement connecté.  
Branchez le cordon d'alimentation à la prise de courant.



Raccordez le tuyau à l'unité de commande.  
Vous entendrez un clic une fois correctement connecté.



Connectez le tuyau à l'attelle.  
Vous entendrez un clic une fois correctement connecté.

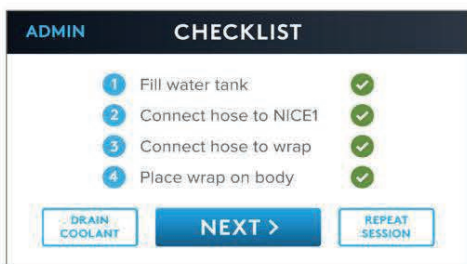

## ÉTAPE 1

Allumez le bouton d'alimentation situé à l'arrière de l'appareil.  
L'écran tactile s'allumera et le logo NICE apparaîtra.  
Confirmez et appuyez sur « NEXT ».



## ÉTAPE 2

Sélectionnez le NIVEAU DE FROID souhaité et appuyez sur « NEXT ».  
(le niveau 5 est le réglage le plus froid).

Les réglages à froid sont les suivants :  
Niveau 1 = 14.4 °C      Niveau 4 = 7.7 °C  
Niveau 2 = 12.4 °C      Niveau 5 = 5.5 °C  
Niveau 3 = 10 °C




## ÉTAPE 3

Sélectionnez le NIVEAU DE COMPRESSION souhaité et  
TYPE DE COMPRESSION et appuyez sur « NEXT ».

Attention, par défaut mettre :

**MED**      **INTERMITTENT**

LOW : Faible - MED : Moyen - HIGH : Haute

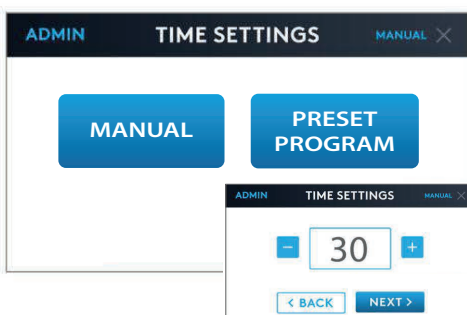

## ÉTAPE 4

Choisissez un réglage manuel de l'heure de 5 à 40 minutes  
pour une seule séance de thérapie OU choisissez un PROGRAMME  
PRÉDÉFINI pour plusieurs séances et appuyez sur « NEXT ».



## ÉTAPE 5

Vérifiez et confirmez vos paramètres en appuyant sur START ou  
appuyez sur BACK pour modifier les paramètres.



## ÉTAPE 6

Pendant votre séance de thérapie, vous pouvez modifier les  
paramètres de froid ou de compression en appuyant simplement  
sur 1 - 5 ou HIGH, MED ou LOW.

A la fin de la séance, vous pouvez éteindre le NICE1.



## MISE EN SERVICE

Merci de nous appeler  
pour la **1<sup>ère</sup> mise en service** au :

**02 34 46 04 40**

ou

**07 60 59 41 41**



---

[www.medirent.fr](http://www.medirent.fr) - [contact@medirent.fr](mailto:contact@medirent.fr)  
120 rue Jacquard - 41350 Vineuil  
Tél +33 (0)2 34 46 04 40 - Fax +33 (0)2 34 46 04 50

## INFORMATIONS IMPORTANTES

Tous nos produits sont nettoyés et désinfectés avant leur départ.

Nous respectons tous les gestes barrières, les mesures d'hygiènes et de sécurités.

**Merci de bien vouloir respecter la propreté des produits et de bien lire la notice d'utilisation.**

### **Avant de nous renvoyer votre appareil**

- Merci de bien nettoyer l'appareil
- Merci de nettoyer votre attelle
- Merci d'enlever tous les résidus (peaux, poils...) sur le manchon et les scratches
- Merci de vider l'eau de l'appareil
  
- De renvoyer au complet (alimentation, rallonge, sac, attelle, bouteille d'eau, clé de purge et la notice)
  
- Merci de vérifier qu'il est complet, de remettre l'appareil dans son carton d'origine, en vérifiant bien son calage.
  
- Merci de nous appeler au 02 34 46 04 40 pour signifier le retour

***Toute dégradation constatée lors du retour de l'appareil, vous sera facturée au coût réel du changement des pièces défectueuses.***

***Tout appareil et accessoires doivent revenir propres, sinon un forfait de 20€ de nettoyage vous sera facturé.***

## **PROCÉDURE DE RETOUR DE VOTRE LOCATION NICE-1 VIDANGE**

AVANT DE METTRE L'ARTICLE DANS SON EMBALLAGE, VÉRIFIEZ QUE L'ARTICLE EST BIEN AU COMPLET avec son chargeur, sa rallonge, sa bouteille d'eau, son sac, son attelle, sa clé de purge et sa notice.



### **VIDANGE DE L'EAU**

Dévissez le bouchon du réservoir et videz l'appareil de toute son eau.

### **ENTRETIEN DU MANCHON OU ATTELLE**

Pour nettoyer l'intérieur de la genouillère, utilisez un antibactérien en lignette à l'alcool isopropylique.

Pour l'extérieur et les scratches, utilisez un rouleau anti-peluches pour enlever les poils et tout autre résidu.

Ne pas laver en machine, ni nettoyer à sec.

## PROCÉDURE DE RETOUR DE VOTRE LOCATION À DÉPOSER EN BUREAU DE POSTE

1. AVANT DE METTRE L'ARTICLE DANS SON EMBALLAGE, VÉRIFIEZ QUE L'ARTICLE EST BIEN AU COMPLET
2. Contactez-nous 48h avant la fin de votre location au **02 34 46 04 40** pour que l'on arrête votre location
3. Oter l'étiquette de livraison sur le colis où figure votre adresse
4. Mettre l'étiquette Retour ci-jointe **E-Chronopost** à la place
5. Refermer le carton avec du scotch (ruban adhésif)
6. Déposer le colis dans un bureau de Poste

Je prépare mon colis



Je colle l'étiquette Retour jointe



Je dépose mon colis

