
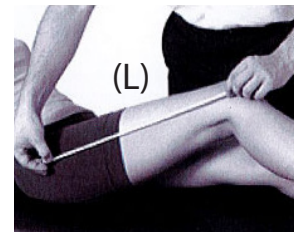


### ETAPE 1 : installation et branchement

- Branchement du câble d'alimentation
- Branchement de la télécommande (détrompeur en bas)

### ETAPE 2 : réglage de la longueur des segments

- Mesurer votre fémur en cm (L). Desserrer les deux boutons (3)
- Reporter cette mesure sur l'échelle graduée (4). Resserrer les deux boutons (3)
- Desserrer les deux boutons (1) et tirer au maximum la planchette (2)
- Installez-vous sur l'appareil
- Amener la planchette (2) en contact avec votre pied
- Serrer les deux boutons (1)

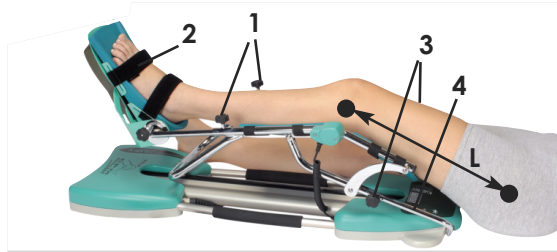

Remarque : nous vous conseillons de mettre l'attelle en flexion à 30° avant de vous installer

### ETAPE 3 : réglage des paramètres


- Actionner l'interrupteur **Marche/Arrêt**, situé à côté du cordon secteur
- Appuyer sur la touche **START** pour **démarrer** le mouvement avec les valeurs précédemment utilisées
- Appuyer sur la touche **STOP** pour **stopper** le mouvement
- Appuyer sur la touche **START** pour **redémarrer** le mouvement en sens inverse
- Pour modifier la **limite d'extension** : appuyer sur la Touche, puis sur les touches **↑** ou **↓** avant 5 secondes pour régler cette limite
- Pour modifier la **limite de flexion** : appuyer sur la Touche, puis sur les touches **↑** ou **↓** avant 5 secondes pour régler cette limite
- **Blocage/déblocage** de la poignée, appuyer simultanément sur les touches **↑** et **↓**.

#### Réglages de la télécommande :

- 11 - touches de modifications des valeurs de fonctionnement
- 12 - touche de réglage de la limite d'EXTENSION
- 13 - touche de réglage de la limite de FLEXION

- 14 - touche d'ARRET du mouvement
- 15 - touche de DEPART du mouvement
- 16 - ne pas toucher
- 17 - touche de sélection de la VITESSE



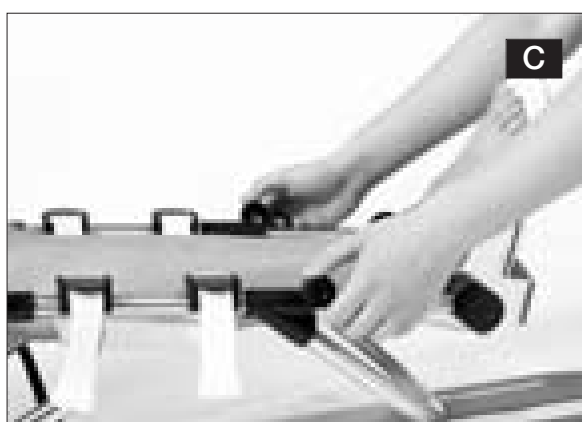

## INFORMATIONS IMPORTANTES

Tous nos produits sont nettoyés et désinfectés avant leur départ.

Nous respectons tous les gestes barrières, les mesures d'hygiène et de sécurité.

**Merci de bien vouloir respecter la propreté des produits et de bien lire la notice d'utilisation.**

### Avant de nous renvoyer votre appareil

- [Bien nettoyer l'appareil](#)
- [Vérifier qu'il est complet\\*](#) et de remettre l'appareil dans son carton d'origine en vérifiant bien son calage.
- [Merci de nous appeler](#) au **02 34 46 04 40** pour planifier le retour.

*\*complet = appareil, câble d'alimentation, télécommande, notice...*

**Toute dégradation constatée lors du retour de l'appareil, vous sera facturée au coût réel du changement des pièces défectueuses.**

**Tout appareil et accessoires doivent revenir propres, sinon un forfait de 20€ de nettoyage vous sera facturé.**

# Procédure de remise en carton de l'appareil

**Appelez-nous afin d'organiser le retour  
de votre Arthromoteur au 02 34 46 04 40**

**Bien nettoyer l'appareil au préalable et le remettre  
dans la pochette plastique**

**Prendre l'étiquette Retour qui est dans la Pochette**

- 1** Positionnez les calages au fond du carton comme présenté ci-dessous



- 2** Positionnez l'appareil dans les calages comme ci-dessous



# Procédure de remise en carton de l'appareil

## 3 Positionnez les calages du dessus



### Photo de face

*Uniquement explicative, pour voir comment bien positionner les calages.  
Ne pas découper le carton !*

- Mettre la pochette Guide d'Utilisation dans le carton.
- Fermer le carton avec du ruban adhésif.
- Enlevez l'ancienne étiquette de livraison sur le colis où figure votre adresse.
- Mettre la nouvelle étiquette RETOUR, que vous avez dans la pochette et la coller à la place de celle de l'aller.

**IMPÉRATIF !**  
**Appelez-nous au 02 34 46 04 40,**  
**pour l'arrêt de la location, la procédure de retour**  
**et la planification de l'enlèvement par le transporteur.**



- 1** Contactez-nous 48h avant l'enlèvement
- 2** Avant de mettre l'article dans son emballage, vérifiez que celui-ci est bien complet
- 3** Enlevez l'ancienne étiquette de livraison sur le colis où figure votre adresse
- 4** Mettre la nouvelle étiquette RETOUR ci-jointe E-Chronopost à la place
- 5** Refermez le carton avec du ruban adhésif