


### ETAPE 1 : installation et branchement

- Branchement du câble d'alimentation
- Branchement de la télécommande (détrompeur en bas)

### ETAPE 2 : réglage de la longueur des segments

- Mesurer votre fémur en cm et le reporter sur l'attelle
- Installez-vous :

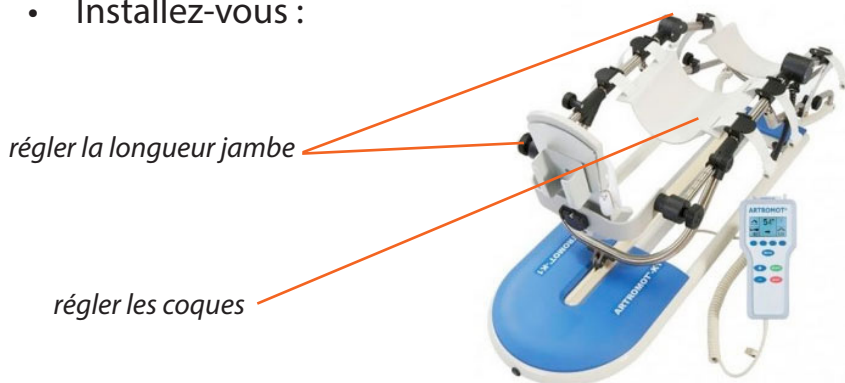

Remarque : nous vous conseillons de mettre l'attelle en flexion à 30° avant de vous installer

### ETAPE 3 : réglage des paramètres



**Extension** : appuyer sur le potentiomètre et tourner de -10° à +120°



**Flexion** : appuyer sur le potentiomètre et tourner de -10° à +120°



**Vitesse** : appuyer sur le potentiomètre et tourner de 5% à 100% (de 25° à 180° par min)




**Temps de pause à chaque fin de cycle extension et flexion** : appuyer sur le potentiomètre et tourner (0 secondes à 1 heure)

### ETAPE 4 : démarrage et arrêt d'urgence

- Appuyer sur START : l'attelle démarre
- Arrêt d'urgence : appuyer sur STOP ou toute touche de la télécommande et l'attelle s'arrête



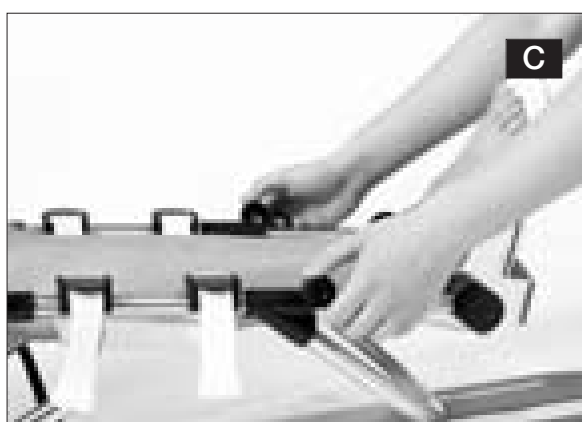

## INFORMATIONS IMPORTANTES

Tous nos produits sont nettoyés et désinfectés avant leur départ.

Nous respectons tous les gestes barrières, les mesures d'hygiène et de sécurité.

**Merci de bien vouloir respecter la propreté des produits et de bien lire la notice d'utilisation.**

### Avant de nous renvoyer votre appareil

- Merci de bien nettoyer l'appareil
- Merci de nettoyer votre attelle
- Merci de vider l'eau des appareils de Cryothérapie
  
- Merci de vérifier qu'il est complet\* et de remettre l'appareil dans son carton d'origine en vérifiant bien son calage.
  
- Merci de nous appeler au **02 34 46 04 40** pour planifier le retour.

*\*complet = alimentation, bac à eau, pain de glaces, rallonge, sac...*

**Toute dégradation constatée lors du retour de l'appareil, vous sera facturée au coût réel du changement des pièces défectueuses.**

**Tout appareil et accessoires doivent revenir propres, sinon un forfait de 20€ de nettoyage vous sera facturé.**

# Procédure de remise en carton de l'appareil

**Appelez-nous afin d'organiser le retour  
de votre Arthromoteur au 02 34 46 04 40**

**Bien nettoyer l'appareil au préalable et le remettre  
dans la pochette plastique**

**Prendre l'étiquette Retour qui est dans la Pochette**

- 1** Positionnez les calages au fond du carton comme présenté ci-dessous



- 2** Positionnez l'appareil dans les calages comme ci-dessous



# Procédure de remise en carton de l'appareil

## 3 Positionnez les calages du dessus



### Photo de face

*Uniquement explicative, pour voir comment bien positionner les calages.  
Ne pas découper le carton !*

- Mettre la pochette Guide d'Utilisation dans le carton.
- Fermer le carton avec du ruban adhésif.
- Enlevez l'ancienne étiquette de livraison sur le colis où figure votre adresse.
- Mettre la nouvelle étiquette RETOUR, que vous avez dans la pochette et la coller à la place de celle de l'aller.

**IMPÉRATIF !**  
**Appelez-nous au 02 34 46 04 40,**  
**pour l'arrêt de la location, la procédure de retour**  
**et la planification de l'enlèvement par le transporteur.**



- 1** Contactez-nous 48h avant d'enlèvement
- 2** Avant de mettre l'article dans son emballage, vérifiez que celui-ci est bien complet
- 3** Enlevez l'ancienne étiquette de livraison sur le colis où figure votre adresse
- 4** Mettre la nouvelle étiquette RETOUR ci-jointe E-Chronopost à la place
- 5** Refermez le carton avec du ruban adhésif