

NICE

MASQUE MAXILLO-FACIAL
INSTRUCTIONS

SYSTÈME DE THÉRAPIE NICE1 FROID MAXILLO-FACIAL



PREPARATION DE L'APPAREIL



05 REMPLISSAGE 1



06 REMPLISSAGE 2

Dévissez le bouchon du réservoir sur le dessus de l'appareil et versez tout le contenu de la bouteille fournie, ou avec de l'eau de source minérale en bouteille.

NE PAS UTILISER L'EAU DU ROBINET !

Utilisez la bouteille d'eau déminéralisée,
qui est livrée avec l'appareil



! CONSERVEZ LA BOUTEILLE D'EAU
A NOUS RETOURNER !



Branchez le connecteur circulaire à l'arrière du NICE1.
Vous entendrez un clic une fois correctement connecté.
Branchez le cordon d'alimentation à la prise de courant.



Raccordez le tuyau à l'unité de commande.
Vous entendrez un clic une fois correctement connecté.



Connectez les tuyaux au masque, en effectuant un quart de tour,
sans forcer.

APPLICATION DU MASQUE



1 – Positionnez le masque sur le visage puis passez les 2 lanières du haut au dessus de la tête en ayant positionné correctement la lanière sous le menton.
Fixez les extrémités des 2 lanières sur la bande.



2 – Passez la sangle élastique du bas du masque derrière le cou et la passer dans l'oeillet opposé afin de pouvoir fixer l'extrémité en tissu agrippant sur la sangle. sans trop serrer.

Veillez à ce que le masque soit correctement ajustée et pas trop serrée pour ne pas causer de douleurs.



3 – Pour connecter les tuyaux au masque, effectuez un quart de tour sans forcer.

4 – Vous pouvez alors allumer la machine, avec le bouton ON/OFF à l'arrière de celle-ci.

REGLAGES DE L'APPAREIL



ÉTAPE 1

Allumez le bouton d'alimentation situé à l'arrière de l'appareil.

L'écran tactile s'allumera et le logo NICE apparaîtra.

Confirmez et appuyez sur « NEXT ».



ÉTAPE 2

Le programme de votre session de cryothérapie est déjà enregistré.

Appuyez sur START pour démarrer la session.

A la fin de chaque utilisation, débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur.



MISE EN SERVICE

Merci de nous appeler
pour la **1^{ère} mise en service** au :

02 34 46 04 40

Nos horaires d'ouverture :

du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h

INFORMATIONS IMPORTANTES

Tous nos produits sont nettoyés et désinfectés avant leur départ.

Nous respectons tous les gestes barrières, les mesures d'hygiène et de sécurité.

Merci de bien vouloir respecter la propreté des produits et de bien lire la notice d'utilisation.

Avant de nous renvoyer votre appareil

- Merci de bien nettoyer l'appareil
- Merci de vider l'eau de l'appareil selon la procédure de vidange ci-après



Le masque n'est pas à nous retourner. Il est à patient unique et ne doit pas être replacé dans le sac de transport après utilisation.

Un masque humide pourrait endommager le matériel.


Dans une telle situation, les frais de réparation vous seront facturés.

- Merci de renvoyer l'appareil au complet (alimentation, rallonge, sac, bouteille d'eau, clé de purge⁽¹⁾ et la notice)
- Merci de vérifier qu'il est complet, de remettre l'appareil dans son sac puis dans son carton d'origine, en vérifiant bien son calage.
- Merci de nous appeler au 02 34 46 04 40 pour signifier le retour



Toute dégradation constatée lors du retour de l'appareil, vous sera facturée au coût réel du changement des pièces défectueuses.

Tout appareil et accessoires doivent revenir propres, sinon un forfait de 20€ de nettoyage vous sera facturé.

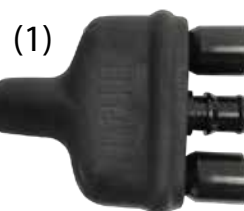

PROCÉDURE DE RETOUR DE VOTRE LOCATION NICE-1 VIDANGE

AVANT DE METTRE L'ARTICLE DANS SON EMBALLAGE, VÉRIFIEZ QUE L'ARTICLE EST BIEN AU COMPLET avec son chargeur, sa rallonge, sa bouteille d'eau, son sac, sa clé de purge et sa notice.



VIDANGE DE L'EAU



Débranchez la rallonge de l'appareil Nice en laissant le masque connecté à l'autre extrémité.



Débranchez le masque de la rallonge au-dessus d'un évier pour vider l'eau du masque et de la rallonge.



Dévissez le bouchon du réservoir de l'appareil Nice et videz-le de toute l'eau.

Bien vissez le bouchon sur l'appareil une fois la vidange terminée.

 **ENTRETIEN DU MASQUE DENTAIRE**
Vous conservez le masque dentaire. Pas besoin de nous le retourner, car il est à usage unique.

PROCÉDURE DE RETOUR DE VOTRE LOCATION À DÉPOSER EN BUREAU DE POSTE

1. AVANT DE METTRE L'ARTICLE DANS SON EMBALLAGE, VÉRIFIEZ QUE L'ARTICLE EST BIEN AU COMPLET
2. Contactez-nous 48h avant la fin de votre location au **02 34 46 04 40** pour que l'on arrête votre location
3. Oter l'étiquette de livraison sur le colis où figure votre adresse
4. Mettre l'étiquette Retour ci-jointe **E-Chronopost** à la place
5. Refermer le carton avec du scotch (ruban adhésif)
6. Déposer le colis dans un bureau de Poste

Je prépare mon colis



Je colle l'étiquette Retour jointe



Je dépose mon colis

