

5

Installation

- 1) Lorsque vous ouvrez l'emballage et sortez cet appareil, procédez avec prudence pour éviter de causer des dommages. Après avoir retiré cet appareil, vérifiez si cet appareil et les pièces sont endommagés ou non.
- 2) Installez cet appareil sur une surface plane et stable.
 - * Pour éviter que le flux d'air de cet appareil ne soit interrompu, installez cet appareil dans un endroit où les obstacles sont à au moins 30 cm de l'évent de cet appareil.


- 3) Ouvrez le bouchon du réservoir d'eau situé à l'arrière de cet appareil, remplissez celui-ci avec de l'eau distillée et faites tourner le bouchon jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.

*** Lorsque vous ajoutez de l'eau distillée, utilisez une seringue ou une tasse avec un bec pointu.**

*** Vérifiez l'indication du niveau d'eau située à l'arrière de cet appareil.**


*** Lorsque cet appareil est utilisé sans fermer complètement le bouchon, l'eau distillée peut jaillir.**

*** Le volume maximum d'eau distillée est de 250 ml.**

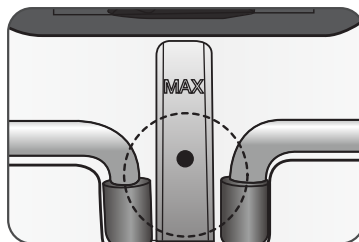


- 4) Vérifiez la section projetée de la prise d'eau située sur le côté de l'appareil et connectez la prise d'eau à celui-ci en la poussant dans la bonne direction jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".

*** Lorsque cet appareil est utilisé sans connecter correctement la tubulure à cet appareil, il existe un risque de fuite d'eau.**

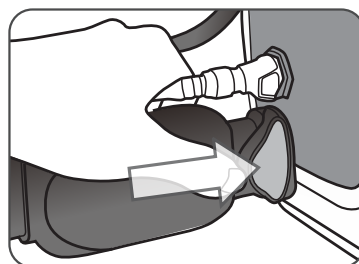


- 5) Après avoir connecté la prise d'eau du tuyau à cet appareil, connectez la prise d'air en la poussant jusqu'à ce que vous entendiez un <clic>.

*** Lorsque cet appareil est utilisé sans être raccordé à la tubulure, il existe un risque de fuite d'air.**

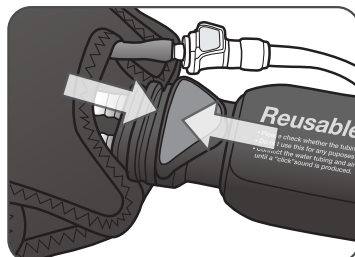


- 6) Vérifiez si la vanne de débit attachée à l'enveloppe est tournée ou non.

*** Lorsque la vanne de débit est tournée de 90 degrés, l'eau distillée peut jaillir.**

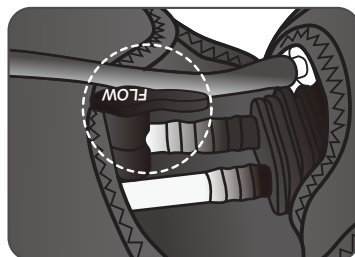

- 7) Vérifiez le sens de la prise du cordon d'alimentation située sur le côté de cet appareil et branchez le cordon. Ensuite, connectez le cordon d'alimentation à la prise électrique.



*** Installez cet appareil dans un environnement où le cordon d'alimentation peut être facilement connecté et débranché.**

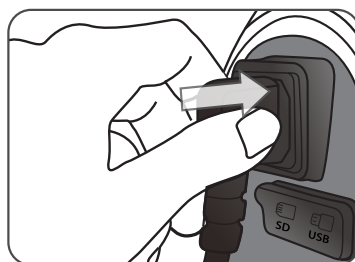


6

Utilisation



※ Utilisez « l'article 5. Installation » comme référence pour installer CTC-7 dans l'environnement prévu.

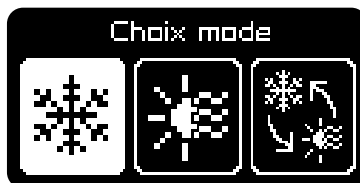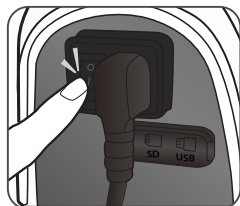

- 1) Lorsque vous allumez l'interrupteur d'alimentation situé sur le côté de cet appareil, l'écran de sélection de mode apparaît.

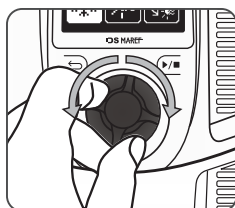

- 2) Sur l'écran de sélection de mode, tournez la molette dans le sens antihoraire ou horaire pour sélectionner le mode à utiliser. Sélectionnez le mode à utiliser et appuyez sur la molette pour passer à l'écran personnalisation du mode sélectionné.

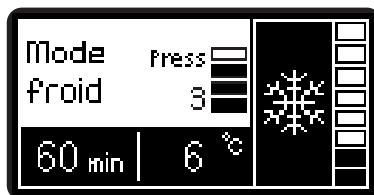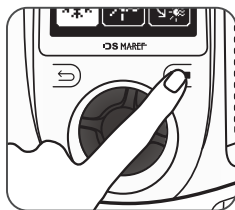

- 3) Terminez le réglage du mode à utiliser et appuyez sur le bouton marche/arrêt pour activer le mode en fonction des réglages.


* Utilisez "6-1, 6-2 Réglages" comme référence pour régler chaque mode.

* Lorsque cet appareil est en marche, les réglages ne peuvent pas être modifiés. Pour modifier les paramètres, arrêtez cet appareil.


* Pour arrêter cet appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt ou appuyez sur la molette.

- 4) Lorsque l'opération est terminée, l'écran se met en veille.

6-1. Réglage mode chaud et mode froid

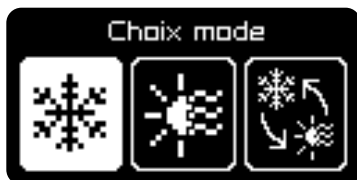


- 1) Sur l'écran de sélection de mode, tournez la molette pour sélectionner le mode froid ou chaud, et appuyez sur la molette pour passer à l'écran de personnalisation.

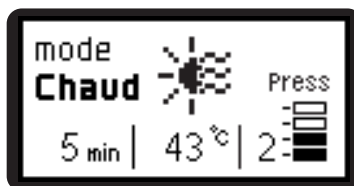

- 2) Sur l'écran de personnalisation, appuyez sur la molette pour passer à l'écran de réglage.


* Sur l'écran de réglage du mode, vous pouvez régler le temps, la température et le niveau de pression.

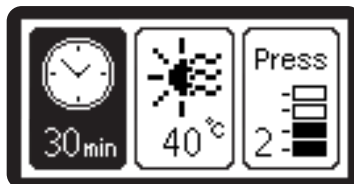

- 3) Sur l'écran de réglage, tournez la molette dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner <Heure>, <Température> et <Pression>. Sélectionnez l'élément (durée, température, niveau de pression) à régler et appuyez sur la molette, une fenêtre de paramétrage apparaîtra. Tournez la molette dans le sens horaire ou antihoraire pour régler les niveaux. Appuyez sur la molette pour enregistrer les paramètres et appuyez sur le bouton de retour pour revenir à l'écran de veille sans enregistrer les paramètres.

* Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour activer le mode en fonction des réglages actuels.

- 4) Sur l'écran de réglage de la durée, tournez la molette pour sélectionner Manuel ou Préréglé

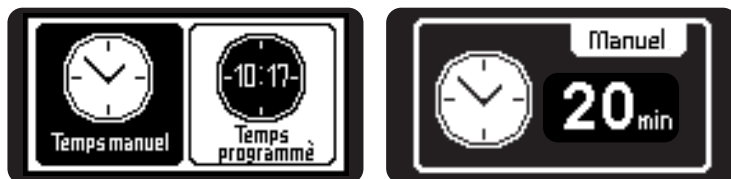

Sur l'écran de réglage manuel, vous pouvez régler la durée d'exécution.

* Plage de temps manuelle

Thérapie par le froid : 5 - 60min / Thérapie par la chaleur : 5 - 30min



Sur l'écran de réglage du temps prédéfini, vous pouvez choisir le temps continu pour le réglage du temps de marche et de pause.

* Plage de temps prédéfinie

- Thérapie par le froid

Marche : 20 - 60min / Pause : 5 - 60min

- Thérapie par la chaleur

Marche : 20 - 30min / Pause : 5 - 60min

*** Plage de réglage mode froid**

Plage de durée mode froid	5 - 60 min	
Plage de température mode froid	6 - 15°C ± 3°C (43 - 59°F ± 5.4°F)	
Plage de pression mode froid	0 Niveau	0 mmHg
	1 Niveau	15 mmHg ± 5mmHg
	2 Niveau	30 mmHg ± 5mmHg
	3 Niveau	50 mmHg ± 5mmHg
	4 Niveau	75 mmHg ± 5mmHg

*** Plage de réglage mode chaud**

Plage de durée mode chaud	5 - 30 min	
Plage de température mode chaud	35 - 45°C ± 3°C (95 - 113°F ± 5.4°F)	
Plage de pression mode chaud	0 Niveau	0 mmHg
	1 Niveau	15 mmHg ± 5mmHg


*** Une utilisation prolongée peut provoquer des lésions cutanées.**

N'appliquez pas consécutivement le mode chaud sur la même zone cutanée.

6-2. Réglage TPC (Thérapie par contraste)



- 1) Sur l'écran de sélection de mode, tournez la molette pour sélectionner <TCP> et appuyez sur la molette pour passer à l'écran de veille TCP.

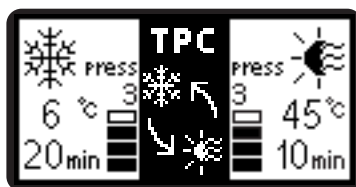

- 2) Sur l'écran de veille TPC, appuyez sur la molette pour passer à l'écran de réglage TPC.


* Sur l'écran de réglage TCP, vous pouvez régler la température, le niveau de pression et le cycle de traitement pour la thérapie par le froid et la thérapie par le chaud.

* En mode TCP, la durée de la thérapie par le froid est fixée à 20 minutes et la durée de la thérapie par le chaud est fixée à 10 minutes.




- 3) Sur l'écran de réglage TCP, tournez la molette dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner <Froid>, <Chaud> et <Cycle>. Sélectionnez l'élément (<Froid>, <Chaud>, <Cycle>) à régler et appuyez sur la molette, et un écran de paramétrage apparaîtra. Appuyez sur la molette dans le sens horaire antihoraire pour régler les paramètres.

* Sur l'écran de réglage TCP, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour activer le mode basé sur les réglages actuels.

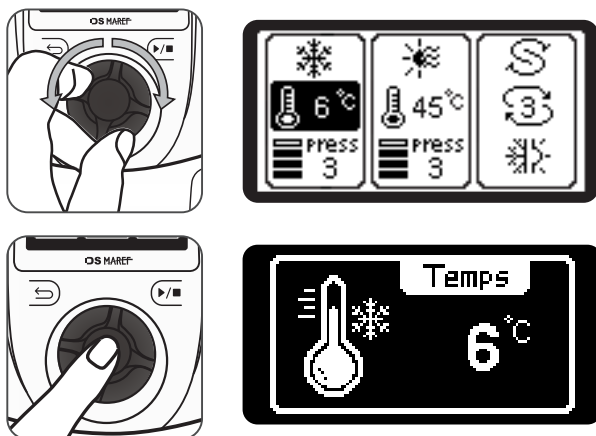

3-1) Sur l'écran de réglage du froid, tournez la molette dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner <Température> et <Niveau de pression>. Sélectionnez l'élément (<Température>, <Niveau de pression>) à régler et appuyez sur la molette, et un écran contextuel apparaîtra. Tournez la molette dans le sens horaire ou antihoraire pour régler les niveaux. Appuyez sur la molette pour enregistrer les paramètres et appuyez sur le bouton Retour pour revenir à l'écran de veille TCP sans enregistrer les paramètres.

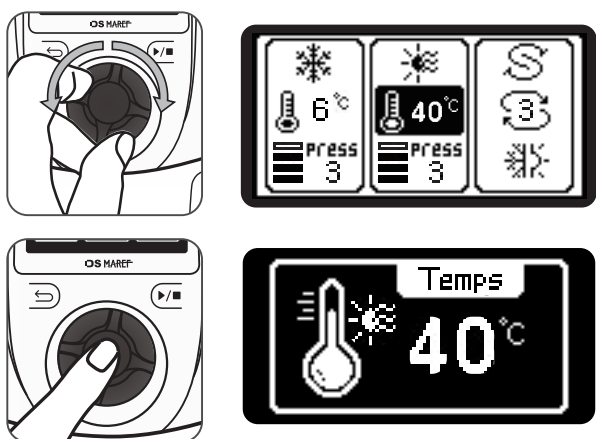

3-2) Sur l'écran de réglage du mode chaud, tournez la molette dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner <Température> et <Niveau de pression>. Sélectionnez l'élément (<Température>, <Niveau de pression>) à régler et appuyez sur la molette, et l'écran contextuel apparaîtra. Tournez la molette dans le sens horaire ou antihoraire pour régler les niveaux. Appuyez sur la molette pour enregistrer les paramètres et appuyez sur le bouton Retour pour revenir à l'écran de veille TCP sans enregistrer les paramètres.



3-3) Sur l'écran de réglage du cycle, tournez la molette dans le sens antihoraire ou horaire pour régler les niveaux. Appuyez sur la molette pour enregistrer les paramètres et appuyez sur le bouton Retour pour revenir à l'écran de veille TCP sans enregistrer les paramètres.

*** plage de réglage TCP**

Plage de durée mode froid	20 min	
Plage de température mode froid	6 - 15°C ± 3°C (43 - 59°F ± 5.4°F)	
Plage de pression mode froid	0 Niveau	0 mmHg
	1 Niveau	15 mmHg ± 5mmHg
	2 Niveau	30 mmHg ± 5mmHg
	3 Niveau	50 mmHg ± 5mmHg
	4 Niveau	75 mmHg ± 5mmHg
Plage de durée mode chaud	10 min	
Plage de température mode chaud	35 - 45°C ± 3°C (95 - 113°F ± 5.4°F)	
Plage de pression mode chaud	0 Niveau	0 mmHg
	1 Niveau	15 mmHg ± 5mmHg
Plage de cycle	1 - 3 cycle	